






Area para implantar servicios MEDIOS DE CULTIVO, PPD, BCG **475m2**

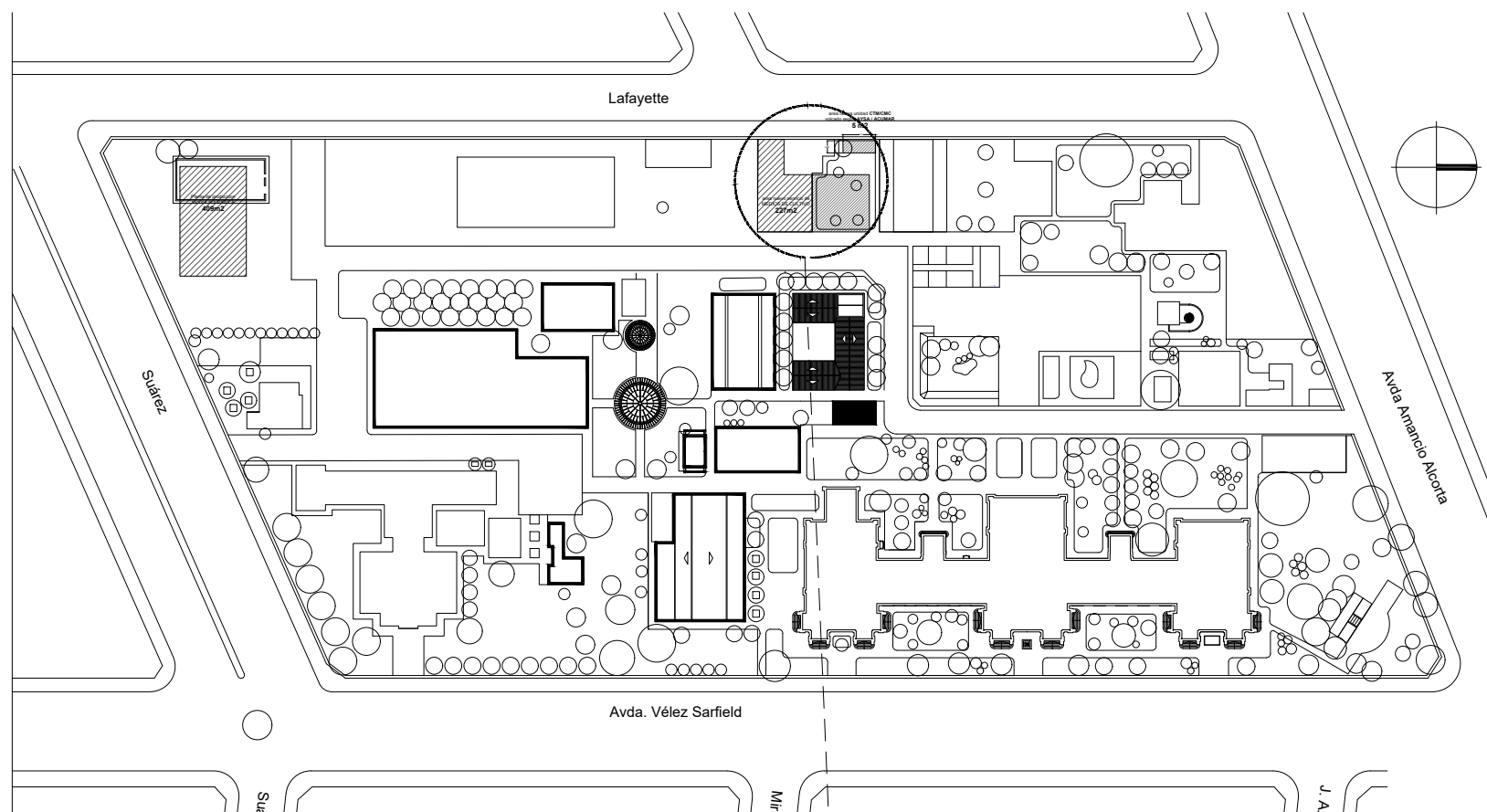

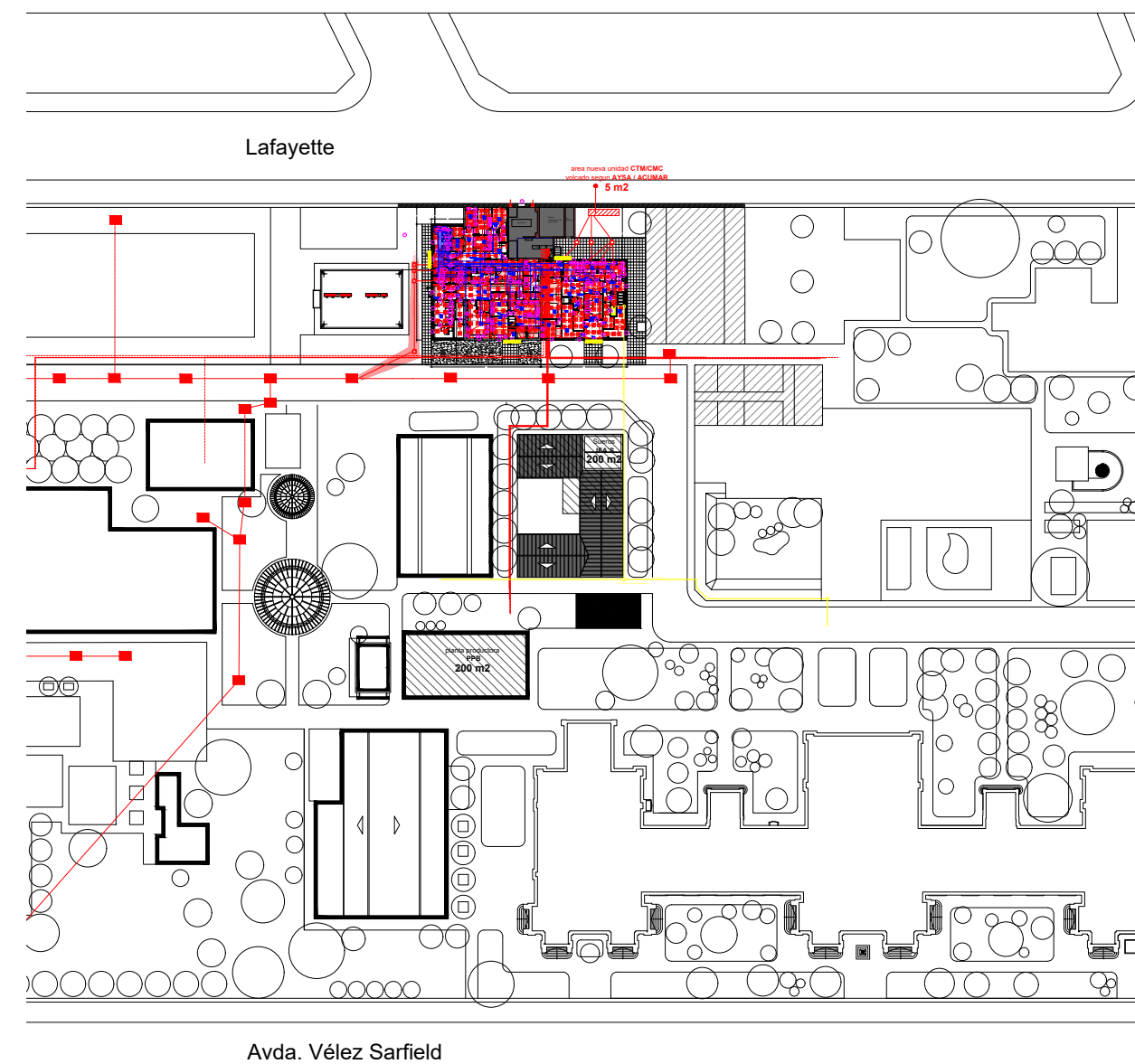

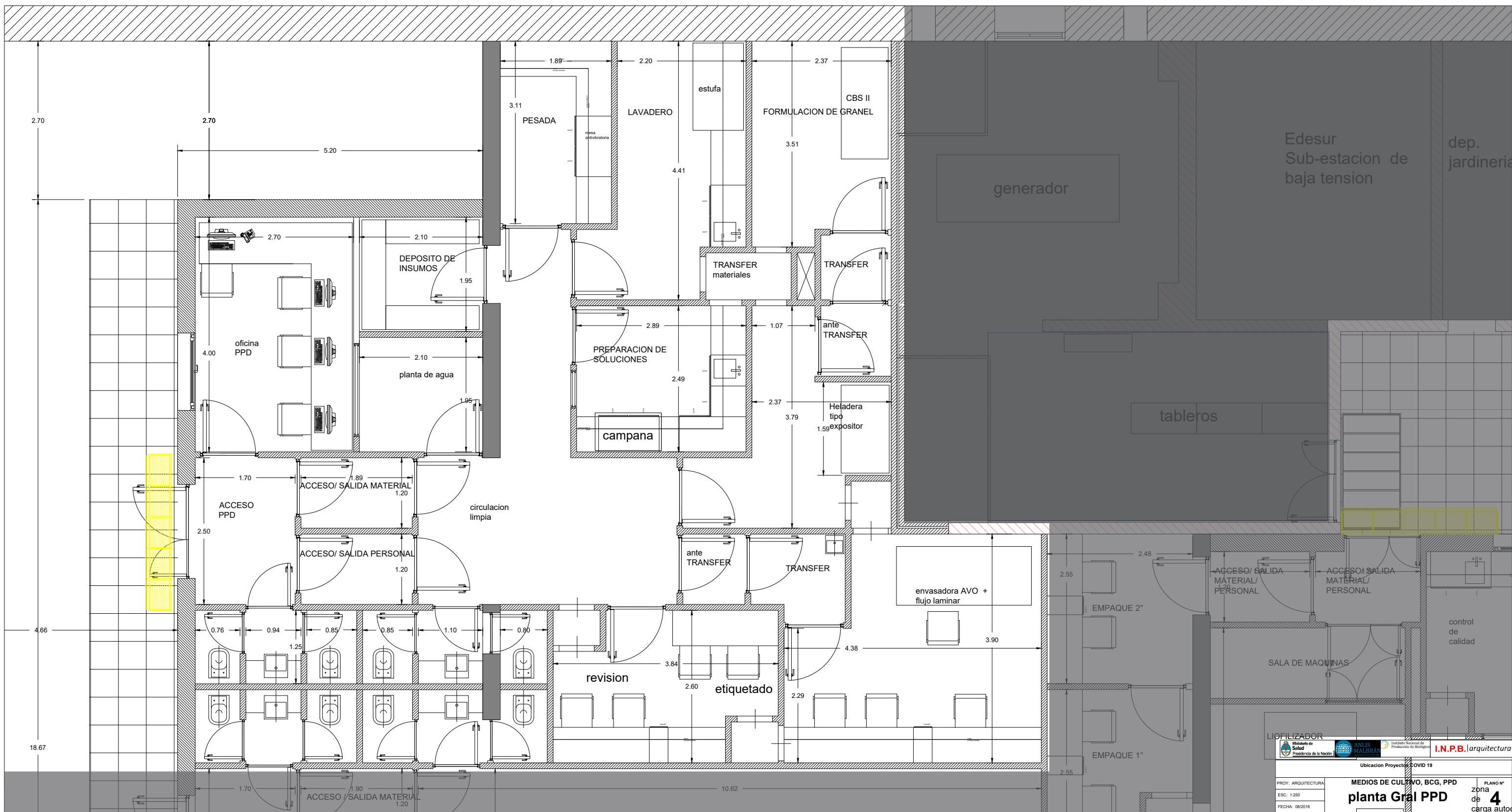

Edesur
Sub-estacion de
baja tension

dep.
jardineria

generador

tableros

ACCESO/ SALIDA
MATERIAL/
PERSONAL

ACCESO/ SALIDA
MATERIAL/
PERSONAL

control
de
calidad

SALA DE MAQUINAS

LIOfILIZADOR

EMPAQUE 1°

EMPAQUE 2°

envasadora AVO +
flujo laminar

TRANSFER

ante
TRANSFER

etiquetado

revisión

campana

PREPARACION DE
SOLUCIONES

2.89

ante
TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER
materiales

estufa

FORMULACION DE GRANEL

CBS II

LAVADERO

PESADA

DEPOSITO DE
INSUMOS


oficina
PPD



ACCESO PPD





ACCESO/ SALIDA MATERIAL

ACCESO/ SALIDA PERSONAL

ACCESO/ SALIDA MATERIAL

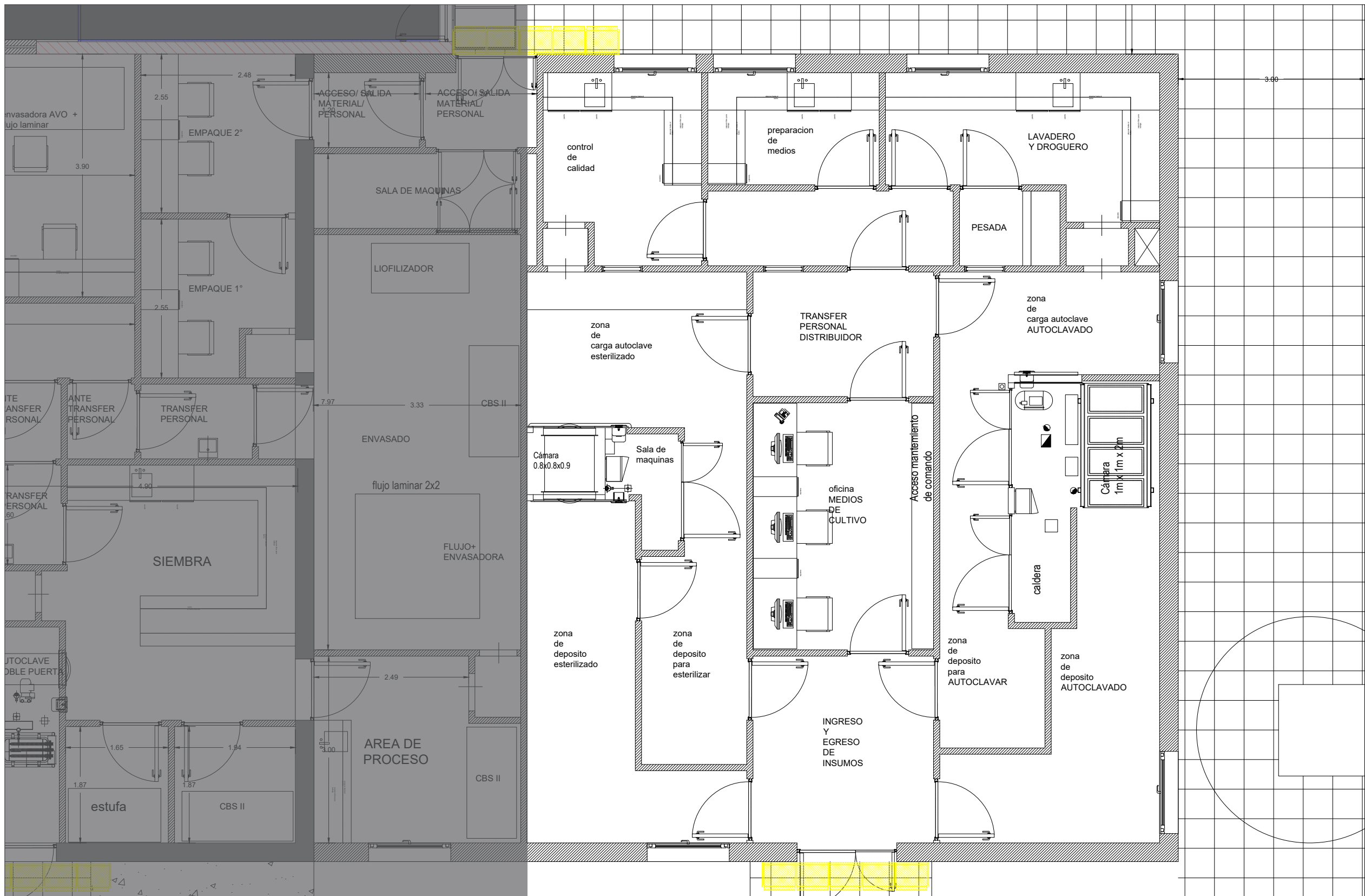

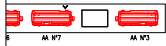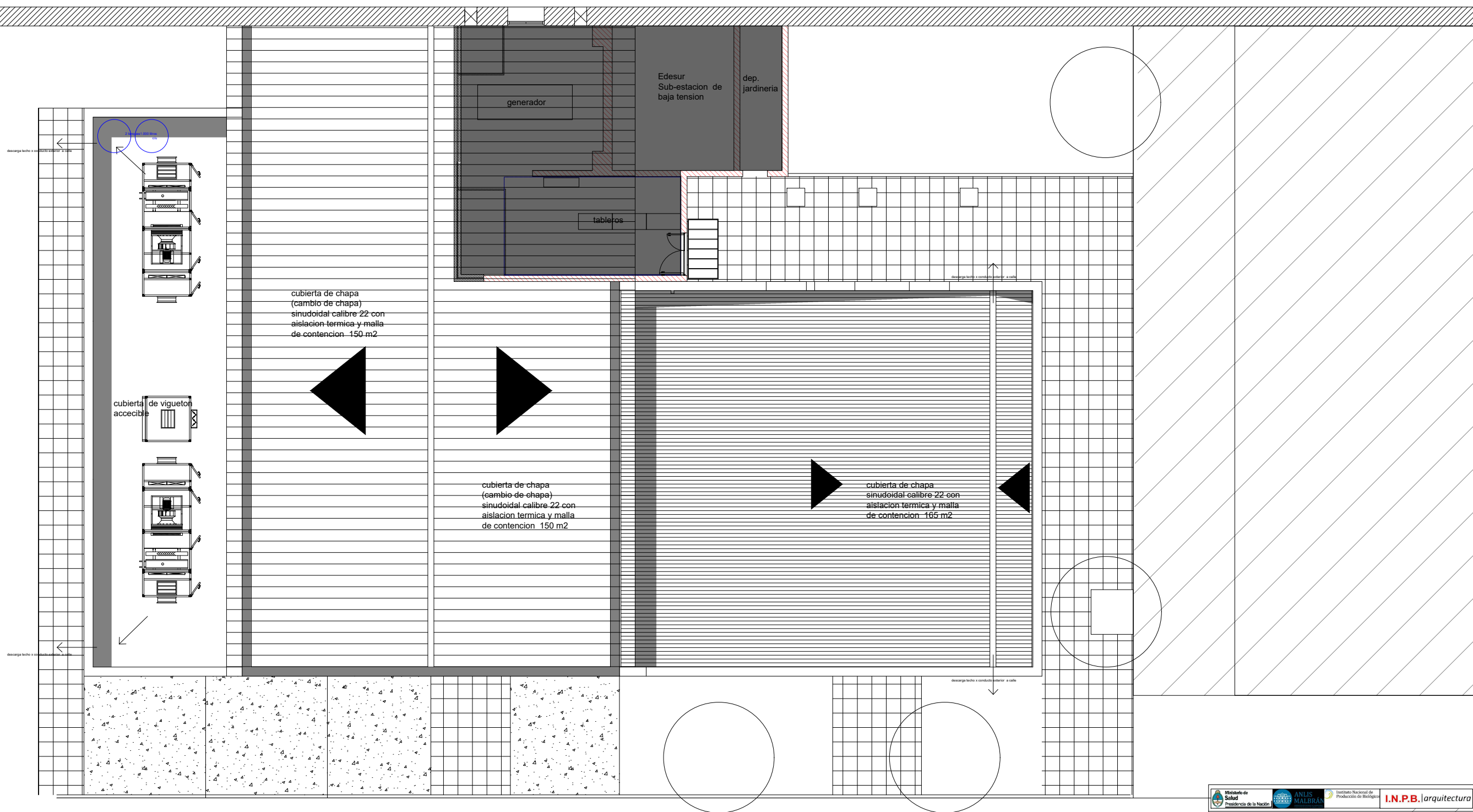


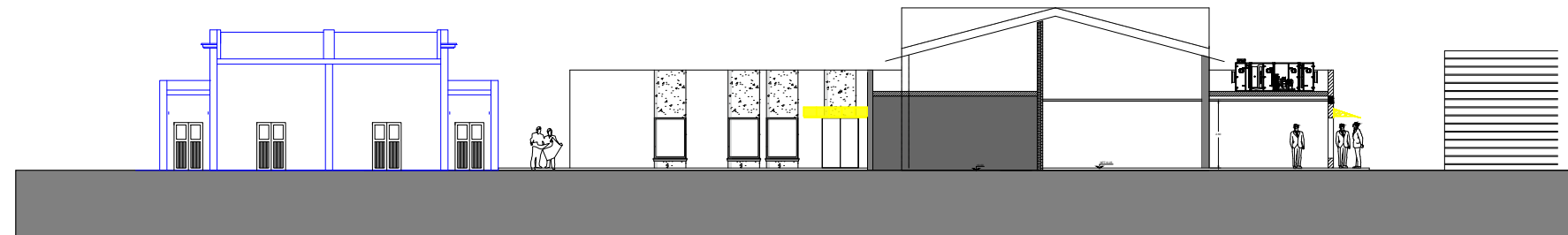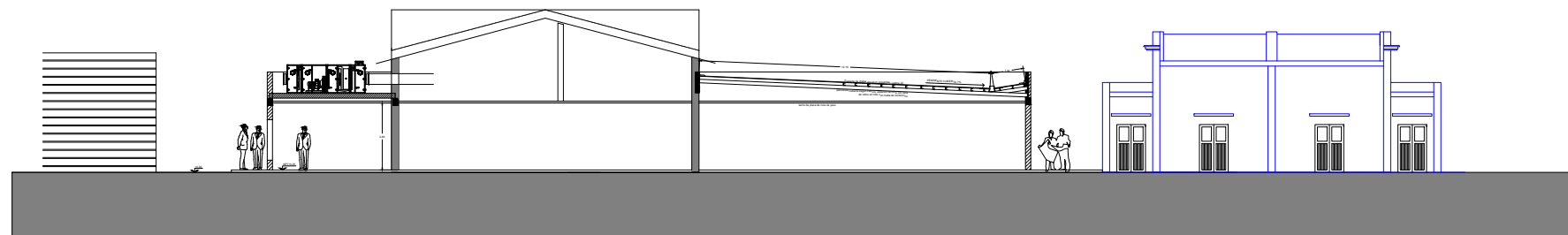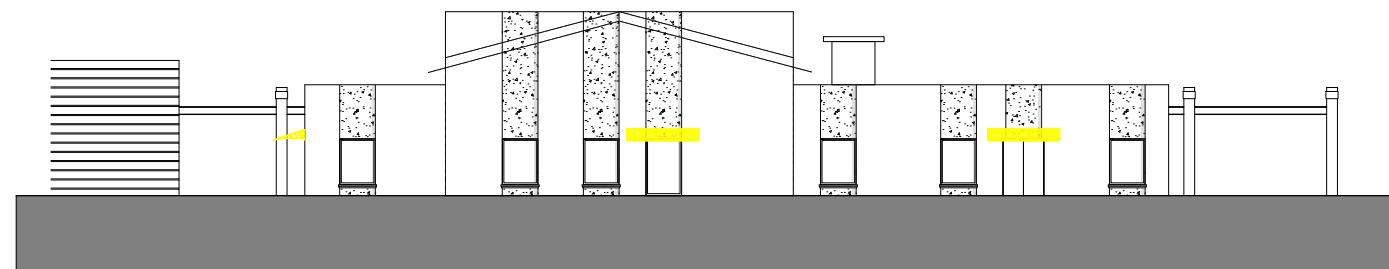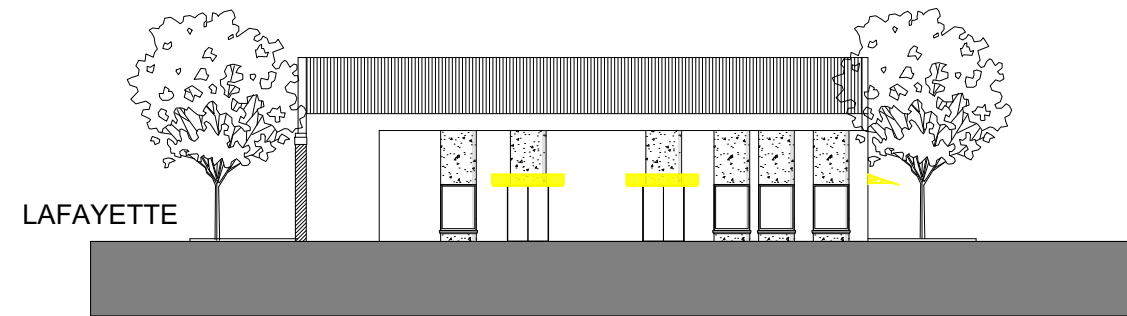





.afayette


area nueva unidad **CTM/CMC**
volcado segun **AYSA / ACUMAR**


• **5 m2**

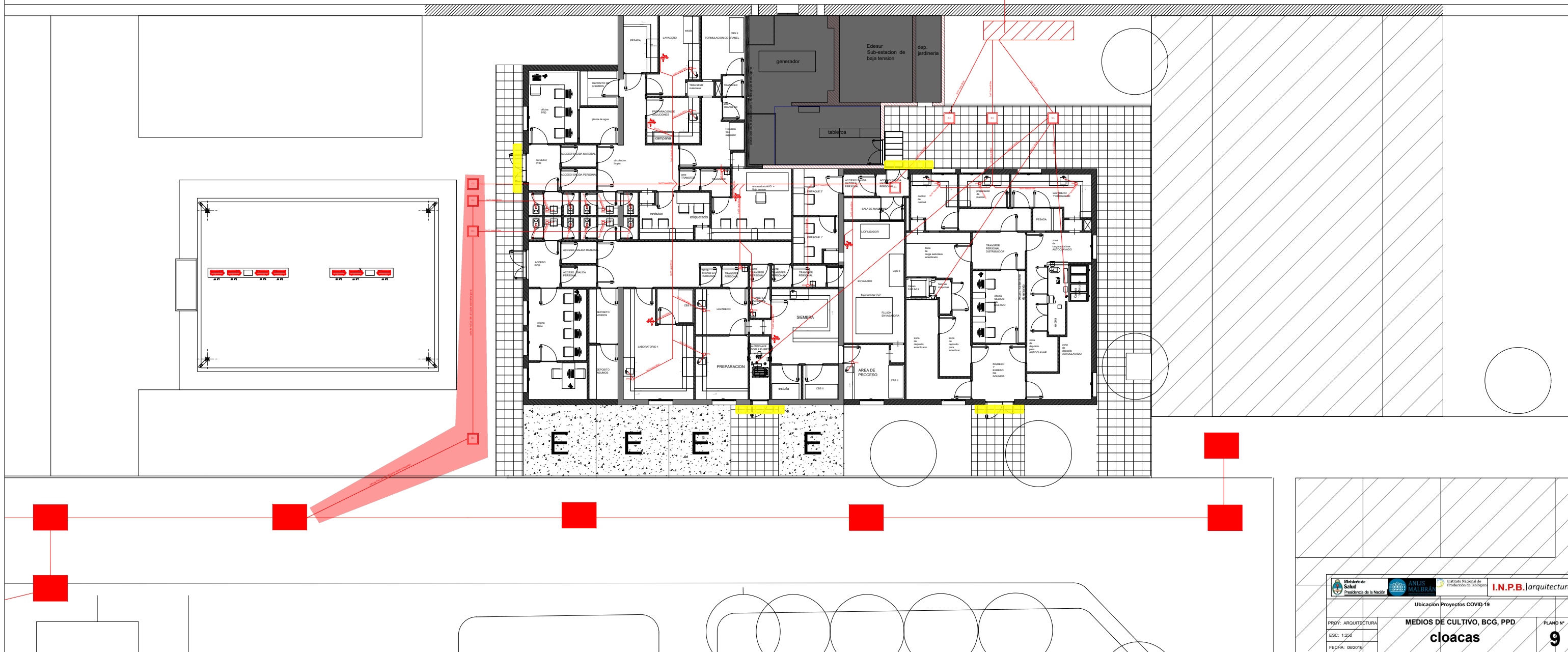












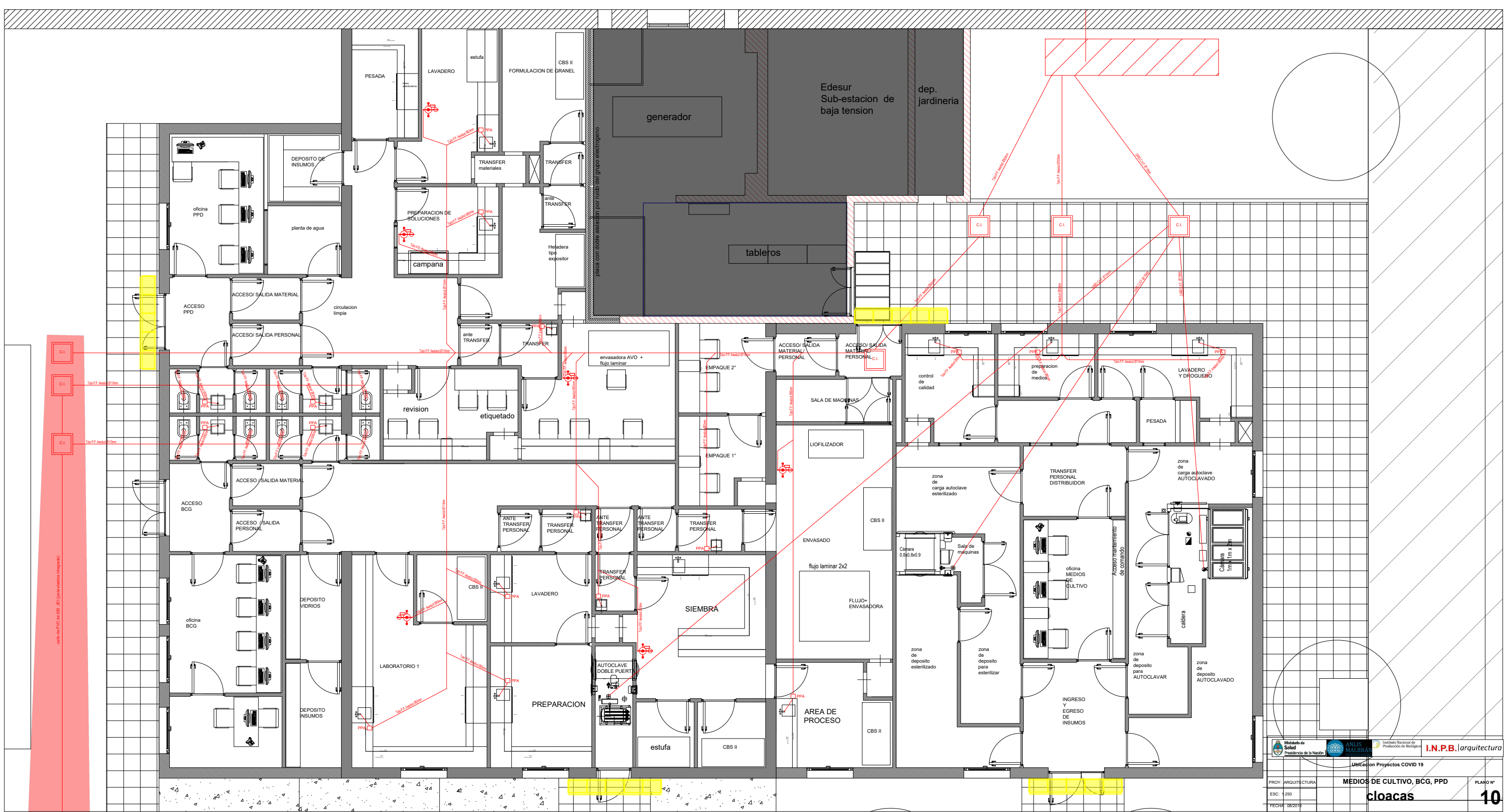


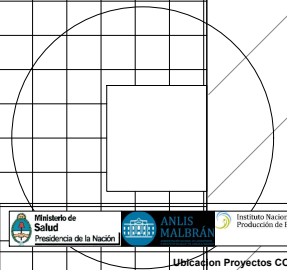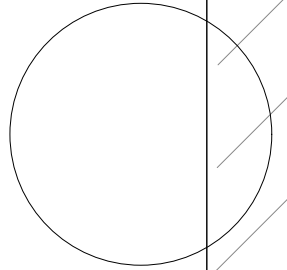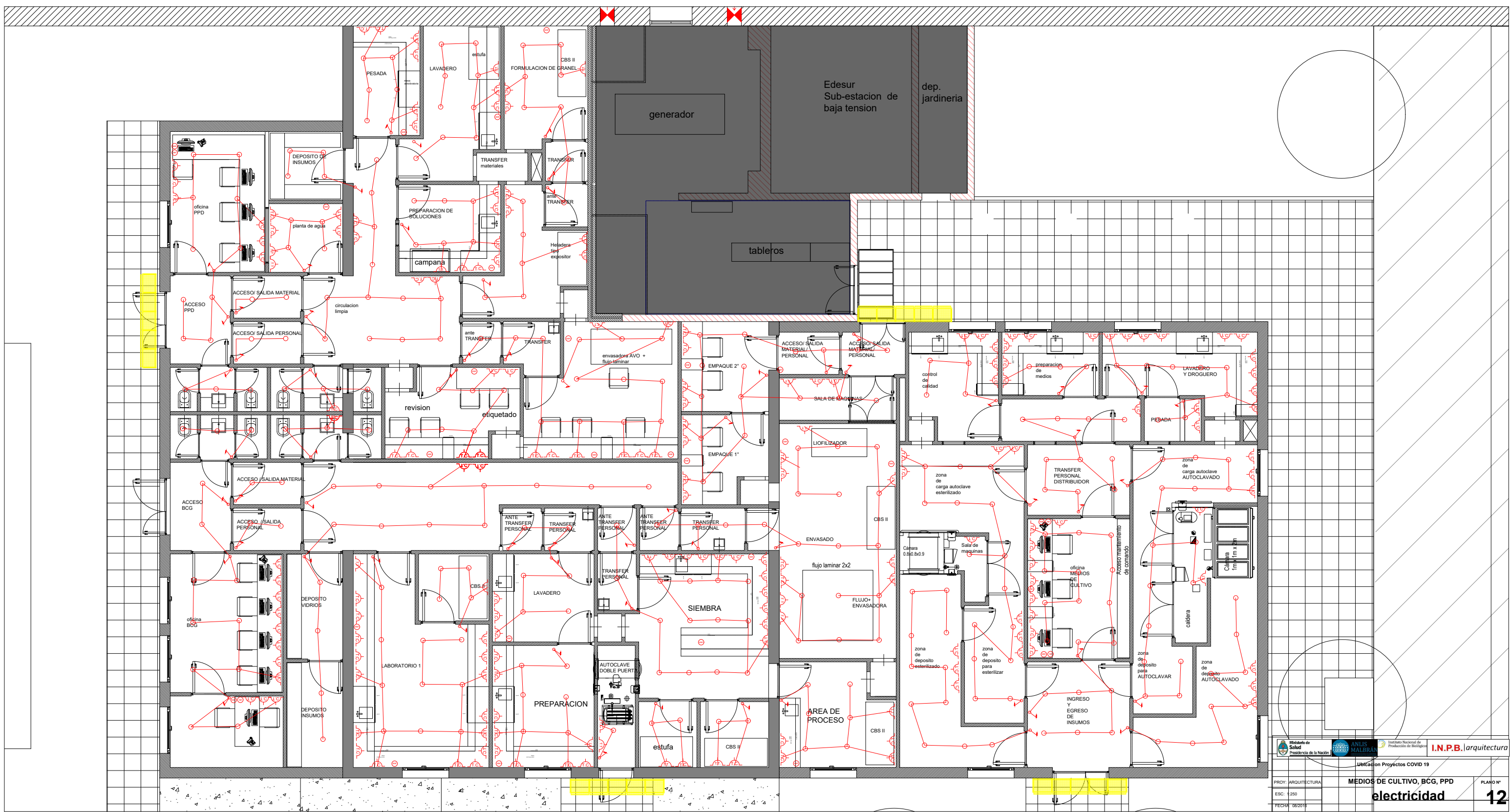


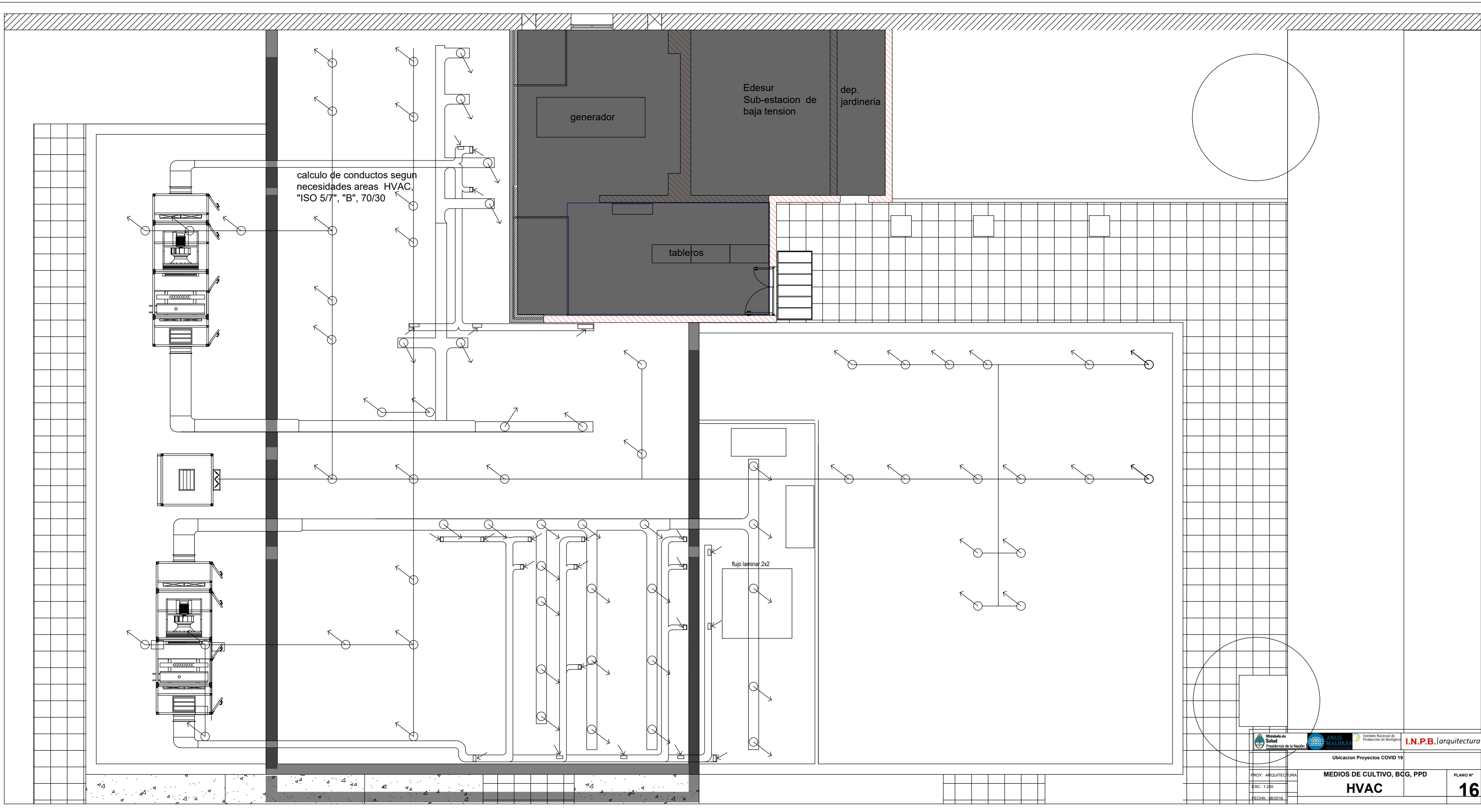


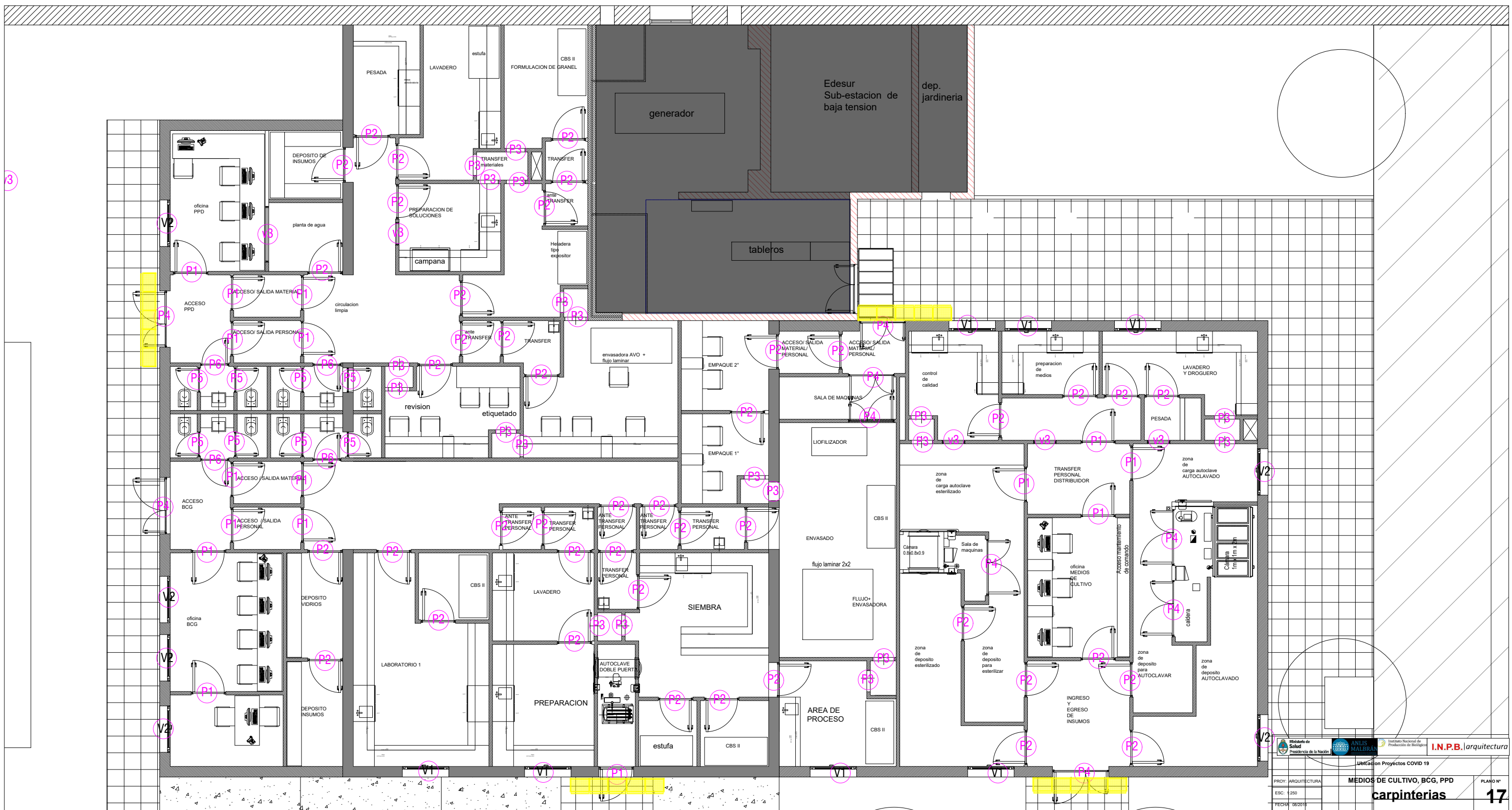

PLANILLA DE CARPINTERIAS

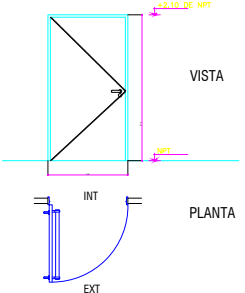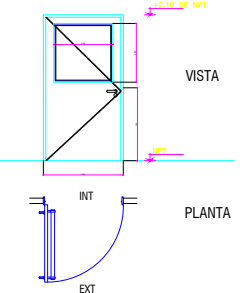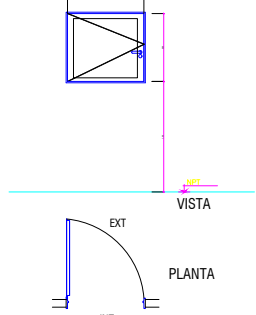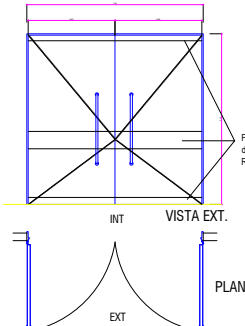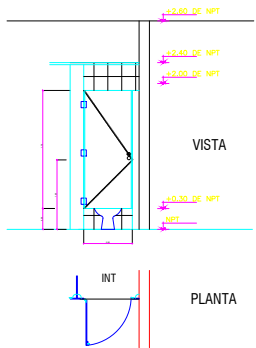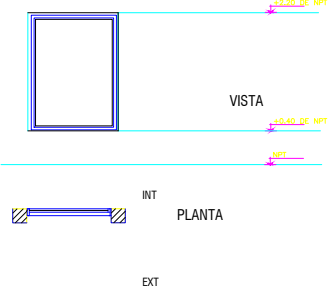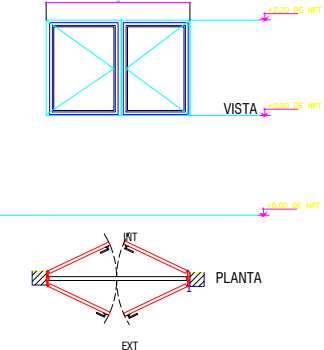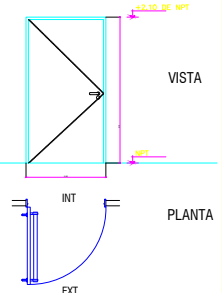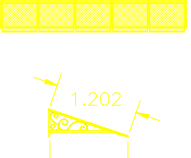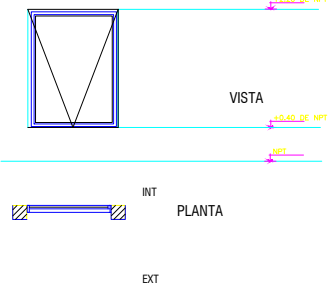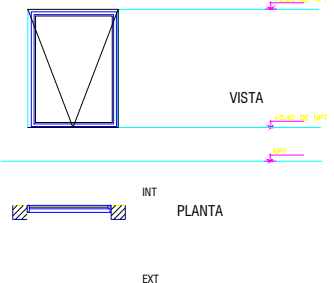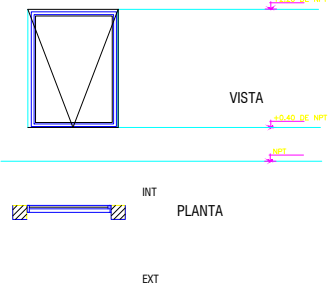P1 ACCESOs		P2 acceso laboratorios, transfer,sanitarios		P3 TRANSFER	
Locales: 00	CANTIDAD: 0	Locales: 00	CANTIDAD: 0	Locales: 00	CANTIDAD: 0
					
PUERTA DE 1 HOJA MARCO: DE CHAPA DOBLADA BWG N° 18 HOJAS: 1 HOJA CHAPA DOBLADA BWG N° 18 DE 4 CM DE ESPESOR HERRAJES: POMELAS MIXTAS DE 160 MM. TIPO SANATORIO REFORZADO CON ROSETAS Ø 48 MM DE BRONCE PLATIL. CERRADURA DE SEGURIDAD FRENTE NIQUELADO TIPO KALLAY ART. 504 O EQUIVALENTE. PINTAR AL ESMALTE SINTÉTICO COLOR a definir FRENOS HIDRAULICOS		PUERTA DE 1 HOJA MARCO: DE CHAPA DOBLADA BWG N° 18 HOJAS: 1 HOJA CHAPA DOBLADA BWG N° 18 DE 4 CM DE ESPESOR HERRAJES: POMELAS MIXTAS DE 160 MM. TIPO SANATORIO REFORZADO CON ROSETAS Ø 48 MM DE BRONCE PLATIL. CERRADURA DE SEGURIDAD FRENTE NIQUELADO TIPO KALLAY ART. 504 O EQUIVALENTE. PINTAR AL ESMALTE SINTÉTICO COLOR a definir FRENOS HIDRAULICOS VIDRIO DE SEGURIDAD TRANSPARENTE 3 + 3 MM / PVB 0.38 DE 0.85 M X 0.85 M.		PUERTA DE UN HOJA MARCO: aluminio línea Coplanar HOJAS: 1 HOJA aluminio línea Coplanar HERRAJES: HERRAJES 2 GRAMPAS CIEGAS ATORNILLADAS Y SELLADAS CON SELLADOR. PINTAR AL ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO. manija y herrajes extra planos.	
P4 Acceso ACCESOS GRALES		P5 Sanitarios		V1 acceso	
Locales: 00	CANTIDAD: 6	Locales: 00	CANTIDAD: 4	Locales: 00	CANTIDAD: 1
					
PUERTA DE DOS HOJAS MARCO: DE CHAPA DOBLADA BWG N° 18 HOJAS: DOS HOJAS CHAPA DOBLADA BWG N° 18 HERRAJES: BISAGRAS DOBLE POMELA REFORZADAS DE HIERRO. HOJA DE APERTURA EN PRIMER TÉRMINO CON BARRAL ANTIPÁNICO INTERIOR Y CON MANILLO EXTERIOR. LLEVARÁ CERRADURA QUE SE DESTRABARÁ CON EL ACCIONAMIENTO ANTIPÁNICO. REFUERZOS INTERIORES PINTAR AL ESMALTE SINTÉTICO COLOR A DEFINIR CON FRENO HIDRAULICO. Faja de protección y zócalo de acero inoxidable de 1.2 mm. REFUERZO.		PUERTA DE UNA HOJA SISTEMA "BATH" SERIE 32 ABS DE PIVOT O EQUIV. PLACAS DE 32 MM DE ESPESOR EN TERCERO FENÓLICO ENCHAPADAS EN LAMINADO PLÁSTICO TIPO FORMICA CON CANTONERAS. PERIMETRALES EN ABS. PUERTAS: DE 32 MM DE ESPESOR, IDEM PANELES, CON TAPACACIOS EN ABS. HERRAJES: BISAGRAS EXTERIORES Y CERROJO DE ALUMINIO MODELO PIVOT DE SIMPLE ACCIONAMIENTO. SUECIÓN INFERIOR: DE PANELES A PISO MEDIANTE HERRAJE DE FIJACIÓN/NIVELACIÓN Y REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE. SUECIÓN A PARED Y ENTRE PANELES MEDIANTE HERRAJES DE FIJACIÓN DE ALUMINIO. SUECIÓN SUPERIOR: CON TUBO DE REFUERZO EN PERFIL DE ALUMINIO.		VENTANA de HOJAS 1 de patio tipo. fijo. MARCO: CHAPA DOBLADA BWG N°18. - PERFILES DE 1.4 MM DE ESPESOR - RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MÍNIMA: 205 MPA - LÍMITE ELÁSTICO MÍNIMO: 170 MPA TERMINACIÓN SUPERFICIAL: anodizado color a definir BURLETES: DE EPDM DE ALTA FLEXIBILIDAD, COLOR NEGRO SEGUN NORMAS IRAM 113001, B46070. SELLADORES: DE SILICONAS DE CURA ACETICA PARA SELLADO DE ALUMINIO Y VIDRIO (VIDA UTIL MÍNIMA 20 AÑOS). FELPAS DE HERMETICIDAD: DE BASE TEJIDA DE POLIPROPILENO RIGIDO CON FELPA DE FILAMENTOS DE POLIPROPILENO SILICONADO CON FINSEAL. VIDRIOS: VIDRIO FLOAT DWH DE SEGURIDAD LAMINADO TRANSPARENTE 4+5+4 MM.	
V3 GENERADOR		P6 ACCESOs		A1 aleros	
Locales: 00	CANTIDAD: 1	Locales: 00	CANTIDAD: 0	Locales: 00	CANTIDAD: 0
					
VENTANA COMPUESTA POR 2 HOJAS de abrir y oscios exterior MARCO: CHAPA DOBLADA BWG N°18. - PERFILES DE 1.4 MM DE ESPESOR - RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MÍNIMA: 205 MPA - LÍMITE ELÁSTICO MÍNIMO: 170 MPA TERMINACIÓN SUPERFICIAL: ANODIZADO simulacion madera BURLETES: DE EPDM DE ALTA FLEXIBILIDAD, COLOR NEGRO SEGUN NORMAS IRAM 113001, B46070. SELLADORES: DE SILICONAS DE CURA ACETICA PARA SELLADO DE ALUMINIO Y VIDRIO (VIDA UTIL MÍNIMA 20 AÑOS). FELPAS DE HERMETICIDAD: DE BASE TEJIDA DE POLIPROPILENO RIGIDO CON FELPA DE FILAMENTOS DE POLIPROPILENO SILICONADO CON FINSEAL. VIDRIOS: METAL DESPLEGADO		PUERTA DE 1 HOJA MARCO: DE CHAPA DOBLADA BWG N° 18 HOJAS: 1 HOJA CHAPA DOBLADA BWG N° 18 DE 4 CM DE ESPESOR HERRAJES: POMELAS MIXTAS DE 160 MM. TIPO SANATORIO REFORZADO CON ROSETAS Ø 48 MM DE BRONCE PLATIL. CERRADURA DE SEGURIDAD FRENTE NIQUELADO TIPO KALLAY ART. 504 O EQUIVALENTE. PINTAR AL ESMALTE SINTÉTICO COLOR a definir FRENOS HIDRAULICOS		ALEROS ACCESO SERVICIOS. MARCO: CHAPA DOBLADA BWG N°18. - PERFILES PLANCHUELA, ELE Y TE, DE 5 MM DE ESPESOR - RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MÍNIMA: 205 MPA - LÍMITE ELÁSTICO MÍNIMO: 170 MPA TERMINACIÓN SUPERFICIAL: ANTIÓXIDO Y PINTURA 3 CAPAS COLOR NEGRO SELLADORES: DE SILICONAS DE CURA ACETICA PARA SELLADO DE HIERRO Y VIDRIO (VIDA UTIL MÍNIMA 20 AÑOS). VIDRIOS: VIDRIO armado	
					
VENTANA de HOJAS 1 de patio tipo BANDEROLA. MARCO: CHAPA DOBLADA BWG N°18. - PERFILES DE 1.4 MM DE ESPESOR - RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MÍNIMA: 205 MPA - LÍMITE ELÁSTICO MÍNIMO: 170 MPA TERMINACIÓN SUPERFICIAL: anodizado color a definir BURLETES: DE EPDM DE ALTA FLEXIBILIDAD, COLOR NEGRO SEGUN NORMAS IRAM 113001, B46070. SELLADORES: DE SILICONAS DE CURA ACETICA PARA SELLADO DE ALUMINIO Y VIDRIO (VIDA UTIL MÍNIMA 20 AÑOS). FELPAS DE HERMETICIDAD: DE BASE TEJIDA DE POLIPROPILENO RIGIDO CON FELPA DE FILAMENTOS DE POLIPROPILENO SILICONADO CON FINSEAL. CON MOSQUITERO EN SU BASE INFERIOR.		VENTANAS DE 1 HOJA MARCO: CHAPA DOBLADA BWG N°18. HOJAS: 1 HOJA CHAPA DOBLADA BWG N° 18 DE 4 CM DE ESPESOR HERRAJES: POMELAS MIXTAS DE 160 MM. TIPO SANATORIO REFORZADO CON ROSETAS Ø 48 MM DE BRONCE PLATIL. CERRADURA DE SEGURIDAD FRENTE NIQUELADO TIPO KALLAY ART. 504 O EQUIVALENTE. PINTAR AL ESMALTE SINTÉTICO COLOR a definir FRENOS HIDRAULICOS		VENTANAS DE 1 HOJA MARCO: CHAPA DOBLADA BWG N°18. HOJAS: 1 HOJA CHAPA DOBLADA BWG N° 18 DE 4 CM DE ESPESOR HERRAJES: POMELAS MIXTAS DE 160 MM. TIPO SANATORIO REFORZADO CON ROSETAS Ø 48 MM DE BRONCE PLATIL. CERRADURA DE SEGURIDAD FRENTE NIQUELADO TIPO KALLAY ART. 504 O EQUIVALENTE. PINTAR AL ESMALTE SINTÉTICO COLOR a definir FRENOS HIDRAULICOS	

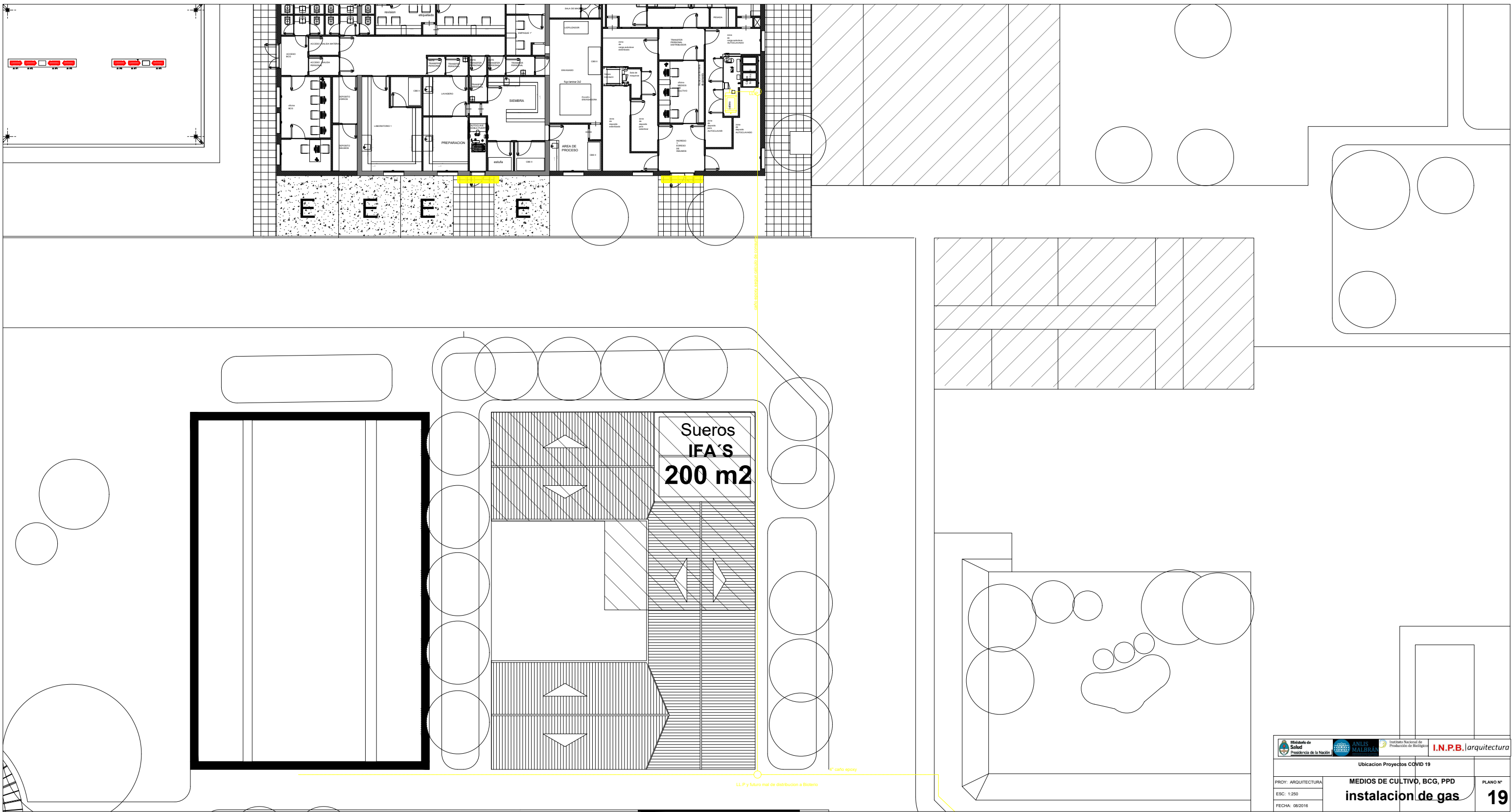

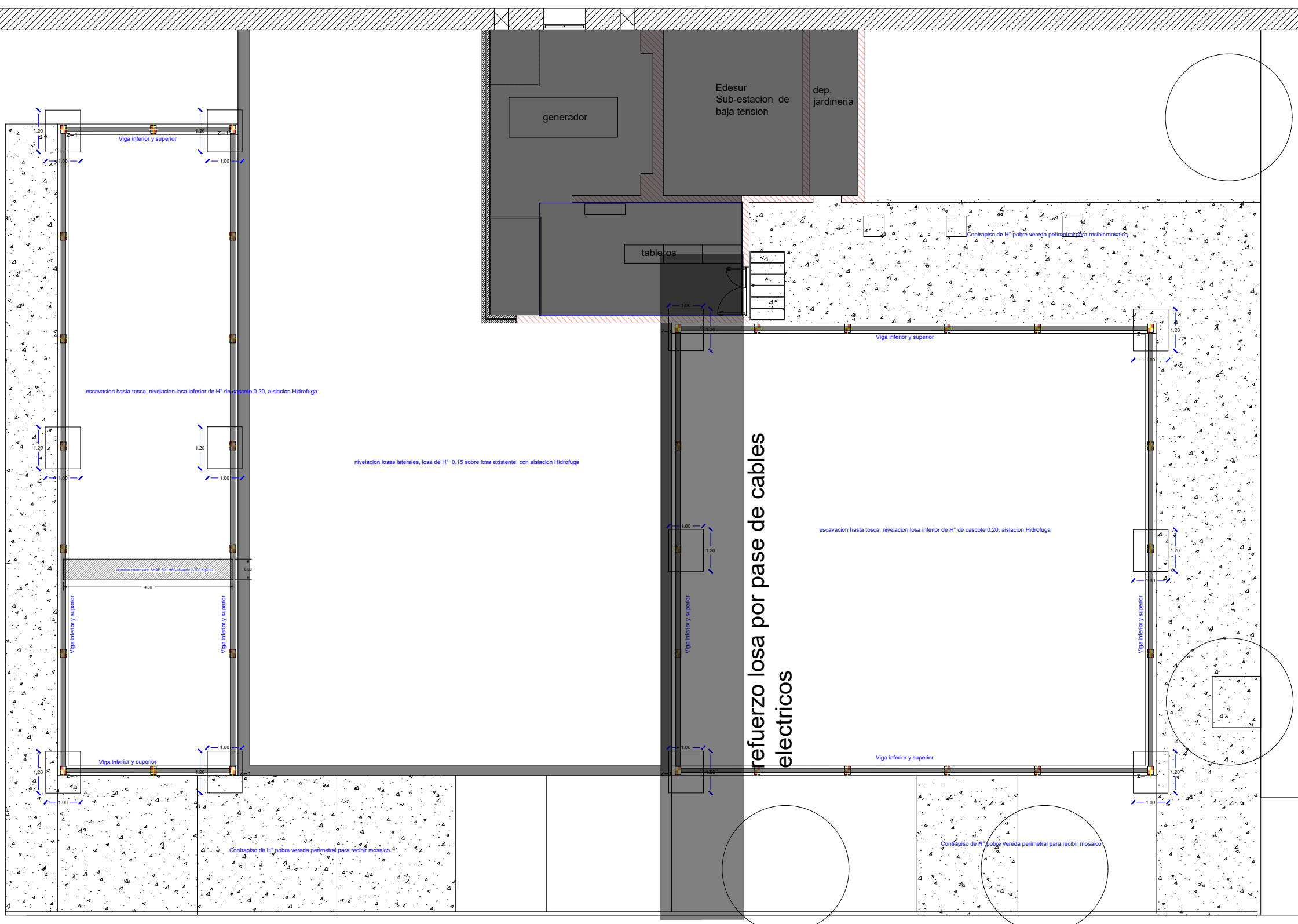


LOCES LIBRES MAXIMAS (L) PARA APOYO SIMPLE

Tipo	Espesor	Serie	Peso propio (g)	Consumo de mortero en juntas	Momento flexor admisible (M _{adm})	Sobrecarga (p)													
						200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
	cm		kg/m ²	litros / m junta	kgm/m	g/m ²													
LH60 10	10	1	160	4.4	394	2.86	2.52	2.27	2.09	1.94	1.81	1.71	1.62	1.55	1.48	1.42	1.37	1.32	1.28
		2			590	3.52	3.10	2.80	2.57	2.39	2.24	2.12	2.01	1.92	1.84	1.76	1.70	1.64	1.59
		3			869	4.29	3.79	3.42	3.15	2.92	2.74	2.59	2.46	2.35	2.25	2.16	2.08	2.01	1.95
		4			1174	5.01	4.42	4.00	3.67	3.42	3.20	3.03	2.88	2.75	2.63	2.53	2.44	2.35	2.28
LH60 12 LH120 12	12	1	180	6.1	971	4.42	3.92	3.56	3.28	3.06	2.87	2.72	2.58	2.47	2.36	2.27	2.19	2.12	2.05
		2			1424	5.38	4.77	4.33	3.99	3.72	3.50	3.31	3.15	3.01	2.88	2.77	2.67	2.59	2.50
		3			1750	5.97	5.30	4.81	4.44	4.14	3.89	3.68	3.50	3.34	3.21	3.09	2.98	2.88	2.79
		4			2176	6.67	5.92	5.38	4.96	4.62	4.35	4.11	3.91	3.74	3.59	3.45	3.33	3.22	3.12
LH60 16 LH120 16	16	1	215	8.8	2484	6.82	6.11	5.58	5.17	4.84	4.56	4.32	4.12	3.94	3.79	3.65	3.52	3.41	3.30
		2			3136	7.68	6.88	6.29	5.82	5.45	5.14	4.87	4.64	4.44	4.27	4.11	3.97	3.84	3.72
LH60 20 LH120 20	20	3			4418	9.13	8.18	7.48	6.93	6.49	6.12	5.80	5.53	5.29	5.08	4.90	4.73	4.58	4.44
		1	255	11.0	5049	9.32	8.43	7.75	7.21	6.77	6.40	6.09	5.81	5.57	5.36	5.17	5.00	4.84	4.70
		2			5845	10.04	9.08	8.35	7.77	7.30	6.90	6.56	6.26	6.00	5.77	5.57	5.38	5.22	5.06
LH60 24 LH120 24	24	3			6564	10.64	9.63	8.85	8.24	7.74	7.32	6.96	6.64	6.37	6.13	5.91	5.71	5.53	5.37
		1	305	12.3	7358	10.70	9.76	9.04	8.45	7.96	7.55	7.20	6.89	6.62	6.37	6.15	5.96	5.78	5.61
		2			8346	11.40	10.41	9.63	9.01	8.49	8.05	7.67	7.34	7.05	6.79	6.56	6.35	6.16	5.98
LH26	26	3			9369	12.08	11.03	10.21	9.55	9.00	8.54	8.14	7.79	7.48	7.20	6.96	6.73	6.53	6.34
		1	350	14.5	10438	12.22	11.23	10.45	9.81	9.28	8.82	8.42	8.07	7.76	7.49	7.24	7.01	6.81	6.62
2					12329	13.29	12.22	11.37	10.67	10.09	9.59	9.16	8.78	8.45	8.15	7.88	7.63	7.41	7.20
LH30	30	1	430	18.0	14800	13.61	12.64	11.84	11.18	10.62	10.14	9.71	9.34	9.00	8.70	8.42	8.17	7.94	7.73
		2					16910	14.55	13.51	12.67	11.96	11.36	10.84	10.39	9.99	9.63	9.30	9.01	8.74


Los pesos propios de las losas pueden variar en ±5%

SOPORTE METÁLICO PARA VANO


(A dimensionar según medidas y cargas)

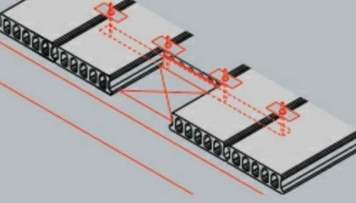

APOYO EXTREMO EN MURO PORTANTE

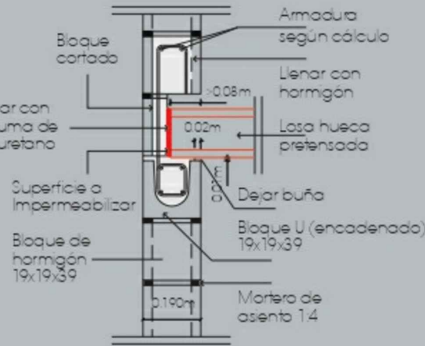

SHAP 60


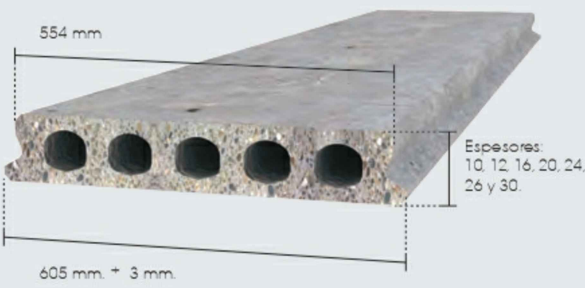


SHAP 120









DETALLE DE ESTRUCTURAS

CUADRO DE ZAPATAS		
TIPO	a	b
Z-1	1.20	1.00

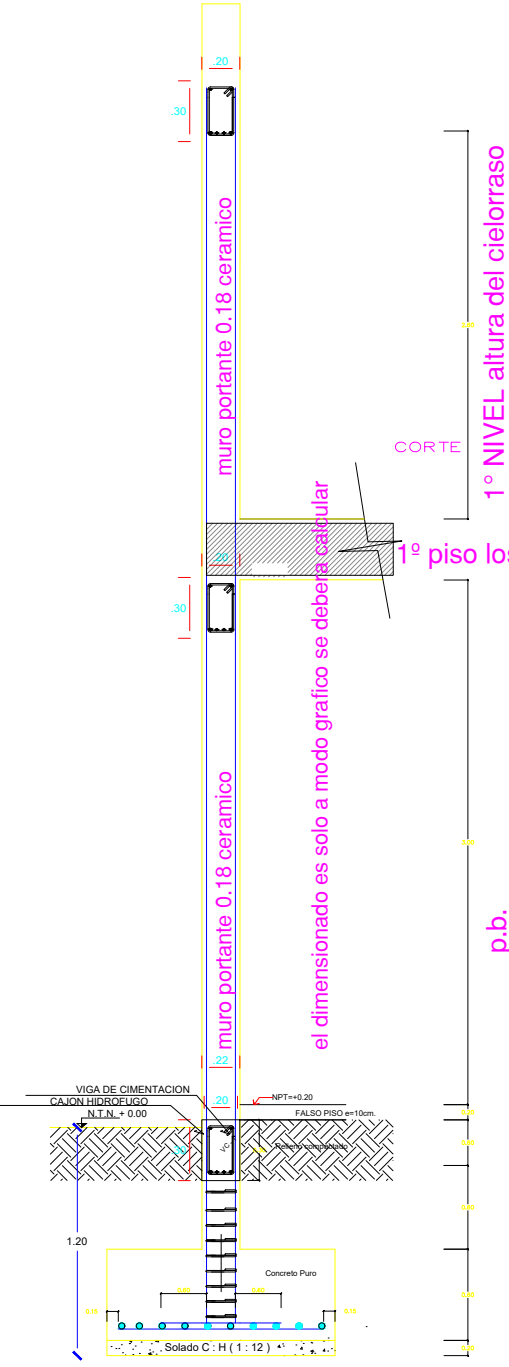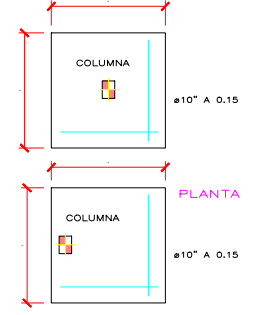



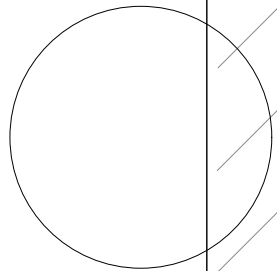

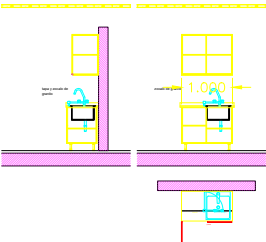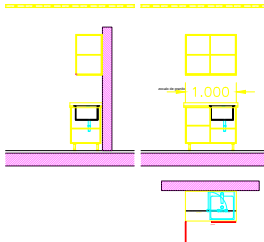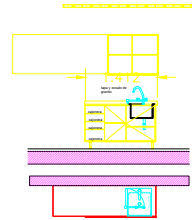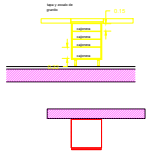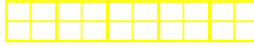
	Lockers vestuarios	CANTIDAD: 0		Muebles Salas	CANTIDAD: 0		Mueble Laboratorio	CANTIDAD: 2		Mueble Laboratorio	CANTIDAD: 1		Mueble Laboratorio	CANTIDAD: 1
					 					 				
	Muebles Laboratorios	CANTIDAD: 3		Alacenas	CANTIDAD:			Mesadas de acero inox 5 cm zocalo 8 cm traforo bacha y griferías						
		Mueble bajo mesada, enchapadas en laminado plastico, color blanco con herrajes tipo C de apertura herrajes telescopico, mesada de granito gris marea, con zocalo, con cajoneras, en anchos de 0.60, diferentes alturas		  		Mueble alacena, enchapadas en laminado plastico 18 mm, color blanco con herrajes y apertura tipo C, instalada, de medidas varias, segun ambientes		    		las medidas son variables segun las areas, se posicionaron sobre el mobiliario y se realizaron refuerzos de apoyo en los lugares donde no hayo mueble				

- Requerimientos (para cada Esterilizador por Vapor 250 Lts)
- 1-Ventilación de vapor al exterior con caño de cobre o bronce Ø 1" rosca macho BSP, con una inclinación de 5° subiendo hacia el exterior y a una altura de 2200 mm del piso.
- 2-Aire comprimido
Compresor de Presión mínima 6 Bar - Provisto por CECAR.
Caudal necesario: 40 litros/minuto.
- 3-Agua fría de línea con llave de cierre terminación hembra roscada Ø 1/2" BSP. Esta línea estará instalada a un ablandador de Agua provisto por CECAR
- 4-Alimentación de fuerza motriz.
3 x 380 V + Neutro + Tierra, con interruptor termomagnético y disyuntor tetrapolares con capacidad de 40 Amperes.
Toma a tierra de acuerdo a norma Iram 2-281 parte III. Potencia Instalada 21 KVA. Consumo 32 Amperes. Altura del piso 1600 mm
- 5-Pileta de patio para desagüe de 200 x 200 mm, sin sifón, con cañería de Ø 2" de material no plástico resistentes a temperaturas de 150 °C. El drenaje debe estar conectado directamente a la red pluvial.
- 6-Toma corriente doble de servicio de 10 Amperes- 220 Volts 50Hz.
- 7- Dos tomas corrientes de 10 Amperes 220 Volts. 50 Hz para Ablandador.
- 8-Un toma corriente de 10 Amperes 220 Volts 50 Hz para Compresor.
- 9-Rejilla de desagüe para cada ablandador.

Nota 1: El recinto donde se encuentra el esterilizador y la sala de maquinas para el mantenimiento del mismo, deben mantenerse a una temperatura maxima de 35 °C, para lo cual deberan proveerse los medios adecuados de ventilacion y disipacion del calor que sean necesarios

Nota 2:La sala de máquinas del esterilizador, debe contar con adecuada iluminación, que permita realizar correctamente los trabajos de mantenimiento del equipo.

Nota 3: El ancho libre todas las puertas que se encuentren en el recorrido de ingreso del equipo hacia su lugar de instalacion deberán ser de 1100 cm o mayor.

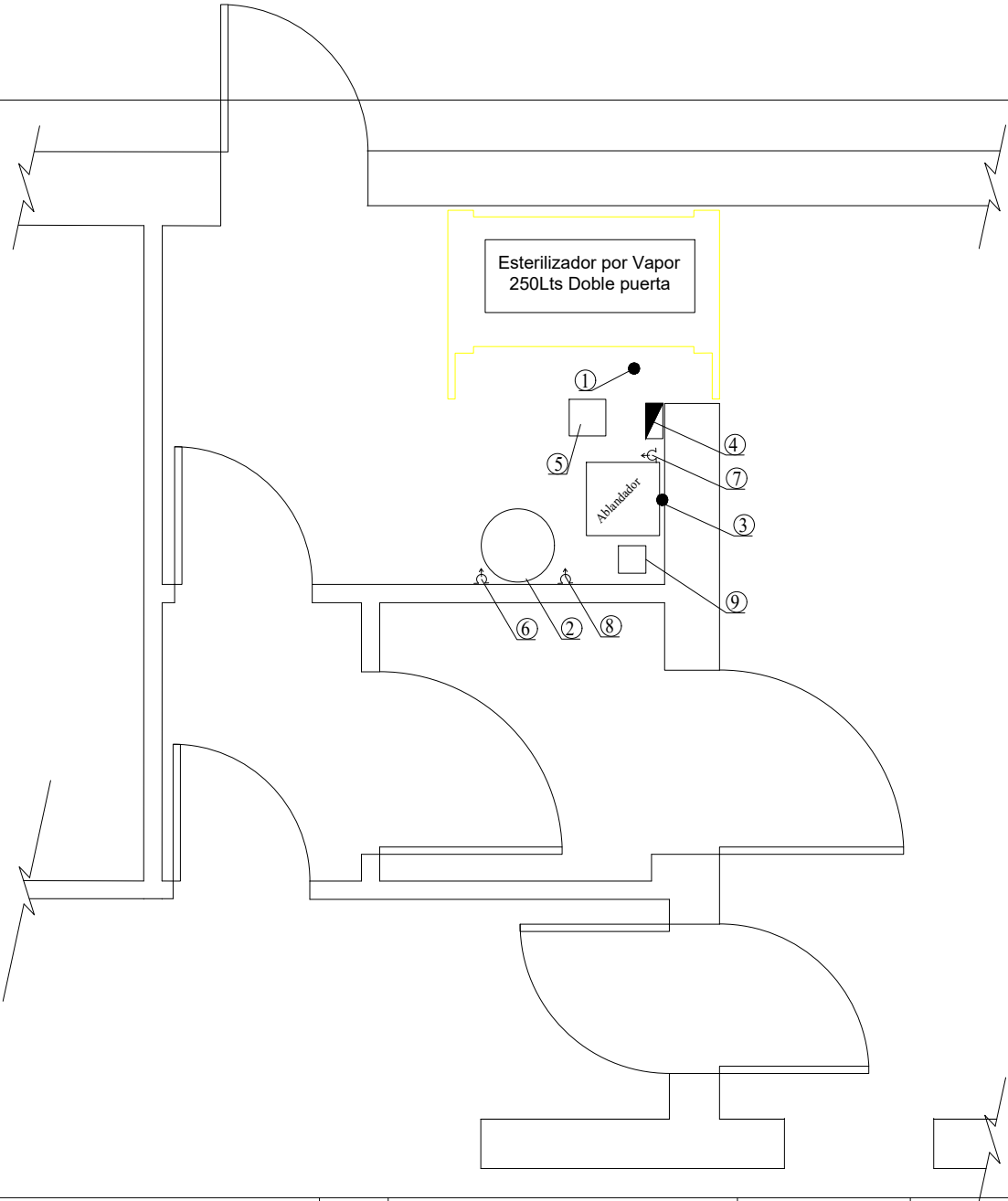

Pos.	Descripción		Cant.	Dimensiones			Material	Observaciones	
Dibujó		Aprobó		Rev. :		Rev. :	Tolerancia General	Tolerancia Particular	
							DIN 7168		
 CECAR Esterilización S.A.		Denominación : Esterilizador Por Vapor 250 Lts Plano de Instalación Instituto Malbrán						Plano N°	Rev.
								PR-064	